

各种动物外周血单核细胞分离液试剂盒

规格：200 mL/kit

保存：本产品对光敏感，应该室温避光储存，保质期 2 年。无菌开封后，保存于室温。

试剂盒组成：


试剂 A 200mL

试剂 D 200mL 全血及组织稀释液 200mL

细胞洗涤液 200mL

操作步骤（仅供参考）：

1. 取新鲜抗凝全血（EDTA、枸橼酸钠或肝素抗凝血均可）或者去纤维蛋白血液，用等体积的全血及组织稀释液或者 PBS 稀释全血。
2. 取一支无菌离心管，先加入试剂 A，再加入试剂 D，使两者形成梯度界面（试剂 A：试剂 D 的体积比为 3：2，如稀释后的血液样本小于 5ml，则先后加入 3ml 试剂 A 和 2ml 试剂 D；如稀释后的血液样本大于 5ml，试剂总量与稀释后的血液样本量相等），两种试剂的分层一定要清晰。
3. 将稀释后的血液平铺到分离液液面上方，注意保持两液面界面清晰。（可以使用巴氏德吸管吸取血液，然后将血液小心的平铺于分离液上，因为两者的密度差异，将形成明显的分层界面。如果样品较多，加样的时间较长，在离心之前出现红细胞成团下沉属正常现象）
4. 室温，水平转子 500~800g，离心 20~30min（血液的体积越大所需的离心力越大，离心时间越长，最佳的分离条件需自行摸索，离心转速最大不超过 1000g）。
5. 离心后将出现明显的分层：第一层为血浆层；第二层为白色单核细胞层；第三层为透明试剂 D 液层；第四层为半透明试剂 A 液层；第五层为红细胞层（如图示）。
6. 小心吸取第二层白色单核细胞层到另一无菌的 15ml 离心管中，加入 10mL 细胞洗涤液或 PBS，颠倒混匀，250g，离心 10min。

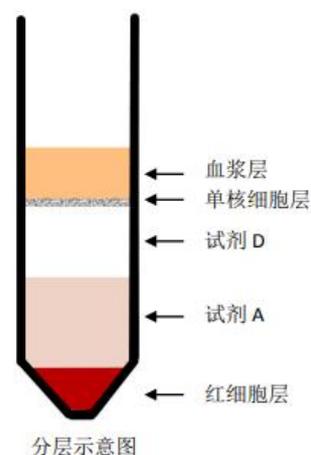

产品仅供科研！



7. 弃上清，5mL 的细胞清洗液或 PBS 重悬细胞，250g，离心 10min。
8. 重复步骤 7
9. 弃上清，细胞重悬备用。
10. 差异贴壁法纯化细胞：用单核细胞培养基以 10^6 个/ml 的密度重悬细胞，将细胞铺于细胞板或细胞瓶中，置于细胞培养箱中进行贴壁培养。
 - 1) 2-4 h 内贴壁的为单核细胞。
 - 2) 10-24 h 内贴壁的单核细胞为内皮、内皮祖细胞、干细胞。
 - 3) 不贴壁的为淋巴细胞。根据不同细胞的贴壁时间存在差异，以达到简单纯化单核细胞的目的。此法成本低，操作简便。如需获得高纯度的目的细胞则需选用免疫磁珠分选或者是应用流式技术分选细胞。

注意事项：

- A. 开封前颠倒混匀，本分离液为无菌产品，为延长分离液保存时间，请在无菌条件下启封，避免微生物污染。。
- B. 分离液使用时应始终保持室温（ $18^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ），如室内温度较低，可将分离液预热。 4°C 或者是温度较低的环境下离心，可能会导致白膜层中红细胞污染加重。
- C. 血液样本最好为新鲜的抗凝血（采血 2 h 以内），为保持单核细胞的活性，应避免冷冻和冷藏。
- D. 稀释血液或洗涤细胞，不可使用含 Ca、Mg 离子的缓冲液及培养液，其成分会导致血细胞凝集，大大降低细胞得率及纯度。
- E. 部分塑料制品（如聚苯乙烯）因其带有的静电作用，可能会导致细胞挂壁，影响分离效果。
- F. 血液样本的粘稠度或者是温度差异，可能会影响分离效果，可以调节离心转数和离心时间，摸索最佳的分离条件。
- G. 吸取过多的单核细胞层及分离液层会导致分离液交界处的粒细胞被吸出从而使混杂的粒细胞数量增加；吸取过多的血浆层可能会导致单核细胞中血浆蛋白及血小板污染。
- H. 如果要进一步对分离的细胞进行培养，那在收集血液和分离过程中，注意无菌操作，避免微生物污染。



I. 不同动物血液在不同比重分离液中的细胞离散系数及细胞带电不同，用户在制定分离液时应提供所需分离液的比重、动物种属及被分离细胞的名称。

相关产品:

AC13980 细胞洗涤液

AC15774 优级胎牛血清

AC13979 全血及组织稀释液

AC10008 RPMI Medium 1640

各种其他动物及其他细胞的分离液及试剂盒

相关文献:

[1] Xin Ni,Liang Zhang,Min Peng,et al. Hydrogen Sulfide Attenuates Hypertensive Inflammation via Regulating Connexin Expression in Spontaneously Hypertensive Rats. Medical Science Monitor. February 2018. (IF 1.98)

[2] Minghui Yang,Jingli Tao,Hao Wu et al. Responses of Transgenic Melatonin-Enriched Goats on LPS Stimulation and the Proteogenomic Profiles of Their PBMCs. International Journal of Molecular Sciences. August 2018. (IF 4.183)

[3] Suoyu Zhu,Qunying Wu,Chenxia Zhang,et al. miR-20a inhibits the killing effect of natural killer cells to cervical cancer cells by downregulating RUNX1. Biochemical and Biophysical Research Communications. October 2018. (IF 2.559)

